



Der Trokar ist ein wichtiges Instrument in der endoskopischen Chirurgie.

Das Stapleline Trokar Set besteht aus zwei Größen von Trokarhülsen und Obturatoren, sowie aus Reduzierhülsen, einer Veress Needle und einem Endobag. Endobags sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: mittel und groß.

Dieses neue Trokar Set ist sehr sicher und operationspraktikabel.

Es sind drei Größen erhältlich: 5 / 10 / 12mm.

Der Trokar hat folgende Eigenschaften:

1. Der Stapleline Trokar ist ein steriles Einweginstrument.


2. Der 10 mm Trokar besitzt einen federnd gelagerten Obturator, welcher das Skalpell schützt. Der Trokar ist mit einer Markierung versehen, die es dem Arzt beim Operieren ermöglicht, die Position des Perforationsschutzes zu beurteilen.

Beim Punktieren kommt die Schneide des Skalpells nur 2,5 mm hervor. Damit wird eine Verletzung der inneren Organe vermieden.

3. Die Stapleline Trokarhülse ist gasdicht und verfügt über einen CO2 Insufflation Port.


4. Die Stapleline Trokarhülse hat Rillen, die den Trokar im Gewebe halten, gleichzeitig stabilisieren sie die Hülse, die dadurch einen kleineren Durchmesser erhält. Dadurch kann die Inzision möglichst klein gehalten werden.

5. Es gibt zwei seitliche Öffnungen zur Befestigung der Trokarhülse während der Operation.

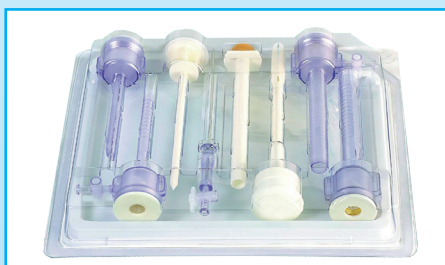

Trokar Set 1	Bestellnummer
2 x Trokarhülse 5 mm	C04-02-Z05B
2 x Trokarhülse 10 mm	
1 x Einführung 5 mm	
1 x Einführung 10 mm	
1 x Reduzierer	
1 x Veress needle 118 mm	
1 x Endobag 10 x 13,5 cm	

Trokar Set 2	Bestellnummer
2 x Trokarhülse 5 mm	C04-02-Z06B
1 x Trokarhülse 10 mm	
1 x Trokarhülse 12 mm	
1 x Einführung 5 mm	
1 x Einführung 10 mm	
1 x Einführung 12 mm	
1 x Reduzierer	
1 x Veress needle 118 mm	
1 x Endobag 10 x 13,5 cm	

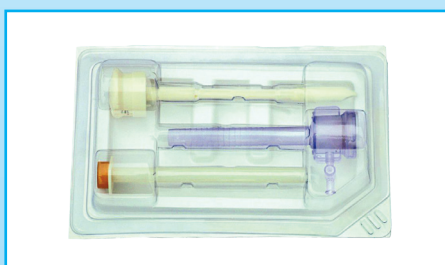

Trokare einzeln	Bestellnummer
10 x 5 mm (o.S.)	C04-02-05-10
10 x 5 mm (m.S.)	C04-02-05-10-2
10 x 10 mm (m.S.)	C04-02-10-10
10 x 10 mm (m.S.) lang	C04-02-10-10-L
10 x 12 mm (o.S.)	C04-02-12-10
10 x 12 mm (m.S.)	C04-02-12-10-1
10 x 12 mm (m.S.) lang	C04-02-12-10-L

Artikel separat	Bestellnummer
10 x Reduzierer	B04-10-1004
10 x Veress needles 118 mm	B04-10-1005
10 x Veress needles 150 mm	B04-10-1007

(o.S.) = ohne Skalpell / (m.S.) = mit Skalpell

